

JOYSTICK MANIPULATOR

TM-S/L JOYSTICK MANIPULATOR

顕微鏡作業の効率化



ストレス
フリーの
ア
プ
ロ
ー
チ

JOYSTICK MANIPULATOR



ジョイスティック
マニピュレーター


- 水平方向はレバー操作で…
 - 垂直方向はダイヤルで…
- 思い通りに位置合わせが可能です!



TM-Sは重量176g、TM-Lは重量350g。とても小型化されており、電子顕微鏡にも同時にそれぞれ12台、8台の設置が可能です。

ジョイスティックを使用しない場合と比較して、コンタクトにかかる時間が $\frac{1}{10}$ 程度に短縮できます。
特殊な2段すべり球構造では、コンタクト時のズレ(より戻し)を防ぐことができます。

手軽な操作で素早く位置合わせ

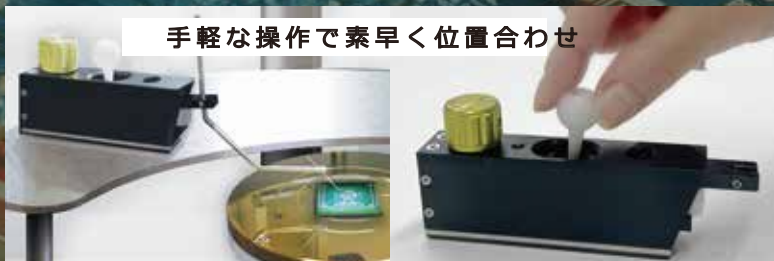

本体はマグネット装備により、ピタッと装着。12台まで設置可能 / TM-S。

2段すべり球構造でコンタクト時のズレ防止

JOYSTICK MANIPULATOR

ジョイスティックマニピュレーター



ジョイスティックはゲーム機のコントローラーと同じく、ストレスなく水平方向の自在な移動操作が可能。

上下移動の操作ダイヤル。



マグネットでピタッと装着。

POINT

レバー操作でスムーズな位置決め

コンタクト時のズレ防止機能

マグネットによる安定装着

豊富な先端アタッチメント



先端アタッチメントのオプションが豊富で、確実な作業がおこなえます。




Attachment


独自の2段すべり球構造でコンタクト時のズレ(より戻し)を防止。



Sタイプ
TM-S W20×H56×D100mm 176g

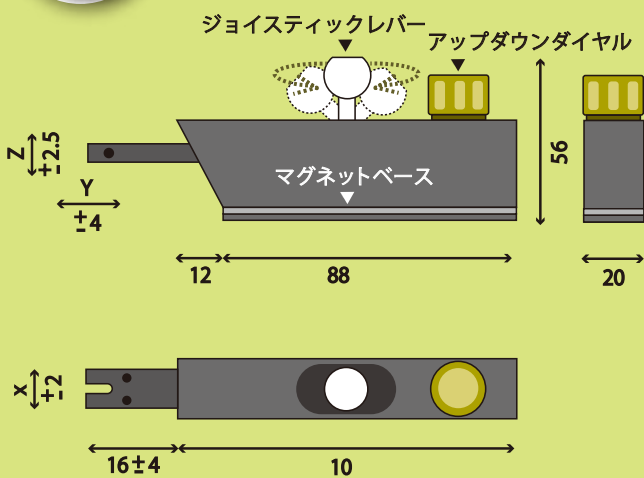

Lタイプ
TM-L W40×H58×D115mm 350g

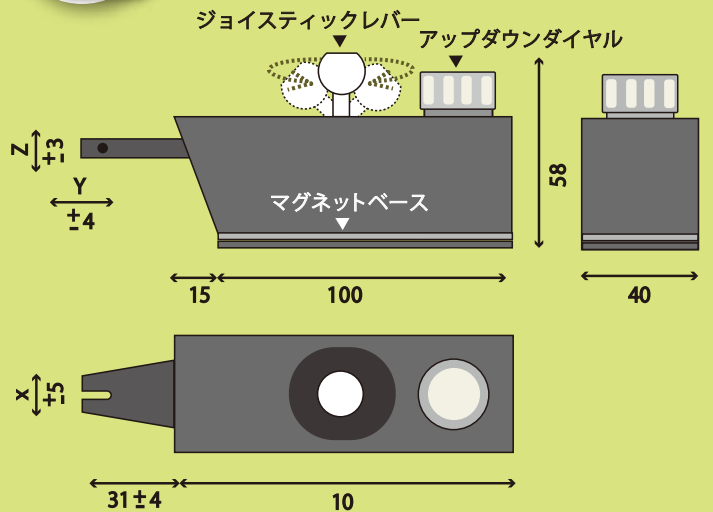

株式会社タイセー

<https://www.e-taise.co.jp/>

〒 273-0104

千葉県鎌ヶ谷市東鎌ヶ谷3丁目-23-54

[TEL] 047-446-2221 [FAX] 047-446-2131

YouTube

動作映像

